


样品名称: 磷酸铝	SOP名称: 磷酸铝粒径. sop	测量时间: 2023/12/20 10:29:17	样品编号: 0001
测试者: Administrator	背景采样时间: 10 秒	单次采样时间: 10 秒	结果类型: 体积 (V)

样品材质: 磷酸铝	样品材质折射率: 1.57	样品材质吸收率: 0.1	分散介质: 水
分散介质折射率: 1.333	分析模式: 通用模式	遮光率 (%): 9.54	分析范围 (μm): 0.1 ~ 750

D10 (μm): 0.740	D25 (μm): 1.086	D50 (μm): 1.538	D75 (μm): 2.077
D90 (μm): 2.629	D97 (μm): 3.251	D(3, 2) (μm): 1.266	D(4, 3) (μm): 1.623
Span: 1.228	体积比表面积 (sq. m/c. c.): 4.740	重量比表面积 (m ² /kg): 1755.577	残差 (%): 0.016
D99 (μm): 3.566	D100 (μm): 4.469	D95 (μm): 2.990	D80 (μm): 2.212

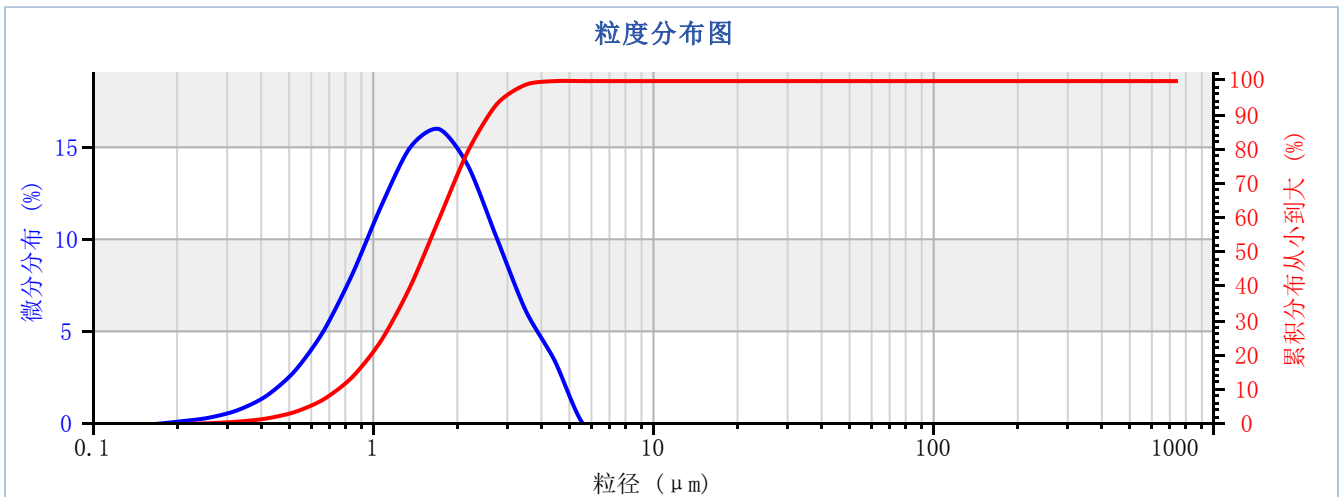

粒径 (μm)	微分 (%)	累积 (%)	粒径 (μm)	微分 (%)	累积 (%)	粒径 (μm)	微分 (%)	累积 (%)	粒径 (μm)	微分 (%)	累积 (%)
0.100	0.00	0.00	1.075	10.64	24.38	11.565	0.00	100.00	124.370	0.00	100.00
0.127	0.00	0.00	1.364	15.61	39.99	14.666	0.00	100.00	157.715	0.00	100.00
0.161	0.00	0.00	1.729	19.76	59.75	18.598	0.00	100.00	200.000	0.00	100.00
0.204	0.08	0.08	2.193	19.76	79.51	23.584	0.00	100.00	253.620	0.00	100.00
0.259	0.24	0.32	2.781	13.75	93.26	29.907	0.00	100.00	321.620	0.00	100.00
0.328	0.44	0.76	3.527	5.69	98.95	37.925	0.00	100.00	407.850	0.00	100.00
0.416	0.89	1.66	4.472	1.04	99.99	48.094	0.00	100.00	517.200	0.00	100.00
0.527	1.90	3.55	5.671	0.01	100.00	60.988	0.00	100.00	655.868	0.00	100.00
0.669	3.67	7.23	7.192	0.00	100.00	77.339	0.00	100.00	750.000	0.00	100.00
0.848	6.52	13.75	9.120	0.00	100.00	98.075	0.00	100.00			